

TOEBEHOREN

Sympress mengapparaat - Meng en druk af met Kettenbach Dental



De voordelen


- Homogene-/luchtbelvrije massa gewaarborgd
- Zeer hoge mengsnelheid dus langere verwerkingstijd van het afdrukmetaal
- Gebruiksvriendelijk en meer zekerheid dankzij het nieuwe jumbo cartridge systeem en de "place & go" dynamische mengtips
- Minimale afmetingen, muurbevestiging mogelijk en dus ruimtebesparing

Dynamische mengtips



Dynamische mengtips voor de 380 ml jumbo cartridge verpakkingen

Deze dynamische mengtips zijn speciaal ontwikkeld voor de jumbo cartridge verpakkingen van de firma Kettenbach Dental.

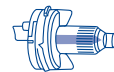

Dynamische mengtips, blauw

50 tips **REF 17900**

Mengtips



Mengtips voor de 50 ml cartridge verpakkingen

De bijbehorende mengtip herkent u aan de kleurcodering (rood of blauw) van de afsluitdop van de verschillende 50 ml cartridges. Voor het omspuiten in de mond van de patiënt kunt u gebruik maken van de passende intra-orale tips. De intra-orale tips, \varnothing 0.6 mm transparant gaan samen met de rode mengtips \varnothing 4.0 mm van Panasil® initial contact X-Light. De intra-orale tips, \varnothing 1.0 mm transparant gaan samen met de blauwe mengtips \varnothing 6.0 mm van Panasil® initial contact Light en Panasil® monophase Medium.



Mengtips, rood, \varnothing 4.0 mm

50 tips **REF 17249**

100 tips **17250**



Mengtips, blauw, \varnothing 6.0 mm

50 tips **REF 17244**

100 tips **REF 17246**



Intra-orale tips, transparant

voor de rode mengtips \varnothing 4.0 mm

100 stuks **REF 17259**



Intra-orale tips, wit

voor de blauwe mengtips \varnothing 6.0 mm

100 stuks **REF 17260**

Lepel adhesief



Lepel adhesief

Gebruik de juiste adhesief (14101 Panasil adhesief, 10 ml is voor additie-siliconen) voor in de lepel en laat de aangebrachte adhesief eerst goed drogen (4 min) voordat er afdrukmetaal wordt aangebracht en er afgedrukt kan gaan worden. Bij lichtuithardende lepels eerst de inhibitielaag met alcohol verwijderen. Indien er geen of een slechte hechting is tussen het afdrukmetaal en de lepelwand dan ontstaan er afdruk-onnauwkeurigheden.



Panasil® adhesief

voor Panasil®

(Vinylpolysiloxan)

10-ml-fles **REF 14101**

Lepel adhesief



Lepel adhesief

Altijd een adhesief gebruiken in een gesloten afdruklepel. (In een geperforeerde lepel kan een lepel adhesief ook gewenst zijn) Gebruik de bijbehorende adhesief: bij Identium® is dat Identium® adhesief en bij additie siliconen is dit Panasil® adhesief voor in de afdruklepel.

Laat de adhesief altijd eerst goed drogen voordat er afgedrukt gaat worden.



Identium® adhesief
voor Identium®
(Vinylsiloxanether)

10-ml-fles **REF 14204**


GEOPTIMALISEERD MENGSTEL – DEZELFDE PRODUCTKWALITEIT

Met het nieuwe geoptimaliseerde 50 ml cartridgesysteem haalt u nog meer uit Panasil®, Futar®, Identium® en Silginat®.



ECONOMISCH

- Profiteer van tot **20% minder materiaal-verlies** dankzij de blauwe mengtip*
- Direct toe te passen:
meer materiaal, minder verspilling

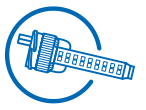

1

COMFORTABEL

Kortere mengtip voor de gewenste vermenging

2

VERTROUWD

Afsluitbaar en origineel

- Origineel en vertrouwd product van Kettenbach Dental
- Hygiënisch en effectief afsluitbaar

3

ZEKER

Positionerings zekerheid:

Eenvoudig en zekere bevestiging van de mengtip

4

UNIEK

Unieke kleurcodering:

Duidelijke mengtip keuze

5

COMPATIBEL

Werkt met hetzelfde **doseerpistool**

6

*Vergeleken met de „oude“ groene mengtip (Ø 6,5 mm)