



SOOO NAUWKEURIG
IS PANASIL®

PANASIL®



Nauwkeurige afdrucken, zelfs in extreme situaties

Additiesiliconen materialen voor kroon- en brugwerk, implantologie en voor de edentate patiënt. Afdrukmaterialen in verschillende viscositeiten voor de 1 en 2 fase afdruktechniek.



Voordelen

- Minmale belasting door uitstekende monduitname van de afdruk
- Reuk- en smaakneutraal dus meer comfort voor de patiënt
- Gegarandeerde 3-dimensionale stabiliteit
- Geoptimaliseerde 50 ml en 380 ml cartridge systeem

Producteigenschappen

- Polyvinylsiloxaan met maximaal elastisch herstelvermogen
- Lange verwerkingsduur, korte intraorale uithardingsduur
- Dosering via het 50 ml cartridge systeem of het automatisch mengapparaat
- Verschillende viscositeiten met ook putty's voor de hand-mix als voor het automatisch mengapparaat

Indicaties/eigenschappen

- Maximale zekerheid, patientvriendelijk en gebruikersgemak
- Unieke initiële hydrofilie met een constante bevochtigingsvermogen
- Korte uithardingsduur en gemakkelijk mengen, voor besparing van kostbare tijd in de praktijk

Economisch en zekerheid - in het nieuwe 50 ml cartridge systeem

- Economisch: In de nieuwe blauwe mengtips blijft 20% minder restmateriaal achter dan in de vorige groene mengtips (Ø 6,5 mm) van de Panasil® Produkten. Meer materiaal, minder verspilling
- Intuïtief: vanzelfsprekende werkwijze
 - Kijk voor meer voordelen op pagina 2

Meer dan 35 jaar
aan innovatie,
kwaliteit en ervaring



NIEUW
Geoptimaliseerd
mengsysteem



Superieure hydrofiliciteit voor superieure prestaties!


Bij een onderzoek* werden A-siliconen en polyether gedurende de verwerkingsduur onderzocht op hun bevochtigingseigenschappen, door middel van videotechnieken en contacthoekmetingen met een hoge resolutie.

Op basis van de hydrofiliciteit in het beginstadium (gekwantificeerd door middel van de aanvankelijke contacthoek) en hydrofiele kinetiek (uitbreidingsvermogen van een waterdruppel) werden zowel aanvankelijk hydrofiele als zeer hydrofobe A-siliconenmaterialen geobserveerd.




* Vergelijkende test uit 2006, uitgevoerd door Kettenbach, waarbij de contacthoek werd gemeten met behulp van het meetapparaat DAS 100 van Kruss. Beoordeeld met behulp van de cirkelpasmethode.
** Affinis Light™, Aquasil Ultra XLV™ en Impregum™ zijn geen gedeponeerde of geregistreerde handelsmerken van Kettenbach.

Behaalt het allersnelst topwaarden

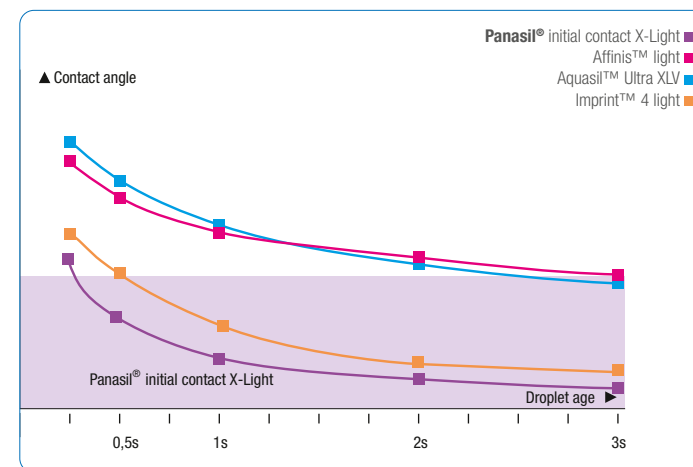


De metingen werden gedaan door Kettenbach Dental, op basis van de meetspecificaties van de desbetreffende DIN/ISO-standaard.

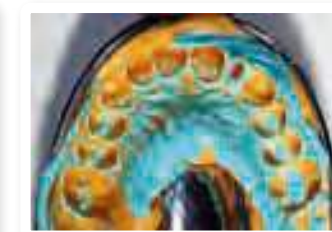

Foto's van Hubert Christian Roggendorf, D.D.S.[dr. in de tandheelkunde] – afdeling tandprothetiek van het centrum voor dentomaxillofaciale geneeskunde van de Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität in Bonn, Duitsland


De tijd tussen het eerste contact en de snelheid waarmee zich de vloeistof verspreid, speelt een doorslaggevende rol bij de verbetering van de nauwkeurigheid van een afdruk. Bovendien is het belangrijk dat de hydrofiliciteit gedurende de hele verwerkingsduur van het materiaal behouden blijft en niet alleen aan het begin aanwezig is. De geteste materialen vertoonden een continue afname in hydrofiliciteit, terwijl de hydrofiliciteit van het A-siliconenmateriaal Panasil® initial contact constant bleef gedurende de hele verwerkingsduur.

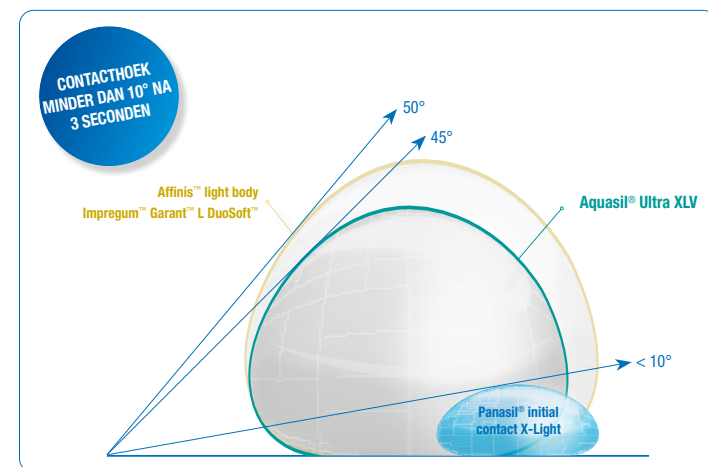


Bij Panasil® initial contact X-Light is na 3 seconden sprake van zeer snelle verspreiding van de waterdruppel en van de kleinste contacthoek, vergeleken met de concurrerende materialen.

ASSORTIMENT

Dynamische
mengtips,
blauw

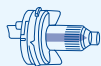

45 tips, art.nr. 17900

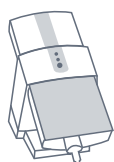

380 ML JUMBO CARTRIDGE VOOR HET AUTOMATISCH MENGAPPARAAT

Patroon 380 ml, 5:1		Introductieverpakking (1 x 380 ml)	Navulverpakking (2 x 380 ml)
Silginat®		–	art.nr. 14713
Identium® Medium / Identium® Medium Fast		art.nr. 14716 / –	art.nr. 14717/art.nr. 14719
Identium® Heavy / Identium® Heavy Fast		art.nr. 1472411 / –	art.nr. 14725/art.nr. 14727
Panasil® monophase Medium		–	art.nr. 14709
Panasil® binetics Putty Fast		art.nr. 14700	art.nr. 14701
Panasil® binetics Putty Soft		art.nr. 14702	art.nr. 14703
Panasil® tray Fast Heavy		art.nr. 14704	art.nr. 14705
Panasil® tray Soft Heavy		art.nr. 14706	art.nr. 14707

2 X 450 ML HANDMIX VERPAKKINGEN

Pot 450 ml, 1:1		Normale verpakking (900 ml) 2 x pot 450 ml, 1:1	Voordeelverpakking (3600 ml) 4 x pot 450 ml, 1:1
Panasil® Putty		art.nr. 11101	art.nr. 11103
Panasil® Putty Fast Set		art.nr. 11141	art.nr. 11143
Panasil® Putty Soft		art.nr. 11121	art.nr. 11123

Mengtips,
rood,
Ø 4,0 mm



50 tips, art.nr. 17249
100 tips, art.nr. 17250

Intraorale tips,
transparant,
Ø 0,6 mm



100 tips, art.nr. 17259

Mengtips,
blauw,
Ø 6,0 mm



50 tips, art.nr. 17244
100 tips, art.nr. 17246

Intraorale tips,
wit,
Ø 1,0 mm



100 tips, art.nr. 17260



50 ML CARTRIDGE VOOR HET DOSEERPISTOOL

Cartridge 50 ml, 1:1		Normale verpakking (2 x 50 ml)	Bulkverpakking (24 x 50 ml)	Bonusverpakking (10 x 50 ml)
Panasil® monophase Medium		art.nr. 1350111	–	–
Panasil® tray Fast Heavy		art.nr. 1355111	–	–
Panasil® tray Soft Heavy		art.nr. 1354111	–	–
Panasil® initial contact X-Light		art.nr. 1340111	–	art.nr. 2830011
Panasil® initial contact Light		art.nr. 1341111	–	art.nr. 2831011
Panasil® contact plus X-Light		art.nr. 1189211	2814411	–
Panasil® contact two in one Light		art.nr. 1178111	2814511	–
Silginat®		art.nr. 1384611 (6 x 50 ml)	art.nr. 1384711	–
Identium® Light / Identium® Light Fast		art.nr. 1370111/art.nr. 1371111	–	–
Futar® / Futar® Fast		art.nr. 1191211/art.nr. 1192611	–	art.nr. 2827711/art.nr. 2827611
Futar® D / Futar® D Fast		art.nr. 1193211/art.nr. 1196111	–	art.nr. 2827811/art.nr. 2827911
Futar® D Slow		art.nr. 1195111	–	–
Futar® Cut & Trim Fast		art.nr. 1197511	–	art.nr. 2827511

ADHESIEF

Fles 10 ml	
Identium® Adhesive	art.nr. 14204
Panasil® Adhesive	art.nr. 14101
Mucopren® Adhesive	art.nr. 14203