



NEW



SOOO ARTISTIEK

MET **VISALYS[®] FILL** & **VISALYS[®] FLOW**

UNIVERSEEL NANO-HYBRIDE VULCOMPOSIT



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

VISALYS® FILL & VISALYS® FLOW

Lichtuithardend Universeel Nano-Hybride vulcomposiet in twee consistenties

VOOR ELKE TOEPASSING

- Voor alle vullingen van klasse I tot VI
- Voor vervaardiging van stompopbouw en reparatie van defecte vullingen
- Voor esthetische vormgeving
- Kan gebruikt worden met elke standaard lichtuithardende bonding

FLEX SHADE SYSTEM VOOR EENVOUDIGE KLEURBEPALING

- Kies de juiste kleur met behulp van het Flex Shade System
- Harmonie en eenvoud dankzij het kameleoneffect voor **alle 16 VITA™ - Classic kleuren** in het anterieure en posterieure gebied, **met slechts vijf kleuren**

COMFORTABELE WERKWIJZE

- Hecht niet aan het instrument en eenvoudig te modelleren (Visalys® Fill)
- Perfecte balans tussen vloeibaarheid en stabiliteit (Visalys® Flow)

UITSTEKENDE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

- Hoog vulstofgehalte: 87% (Visalys® Fill) or 80% (Visalys® Flow)
- Uitstekende buigsterkte:
147 MPa (Visalys® Fill) or 112 MPa (Visalys® Flow)

DUURZAAM VULCOMPOSITIE MATERIAAL

- Minimale verkleuring door minimale waterabsorptie
- Geringe slijtage dankzij geavanceerde vulstoftechnologie voor duurzame vullingen



EENVOUDIGE KLEURAFSTEMMING DANKZIJ HET FLEX SHADE SYSTEM



Het FLEX SHADE SYSTEM maakt efficiënt en duurzaam werken mogelijk met slechts 7 KLEUREN voor esthetische restauraties.

Hier vindt u de hoofdkleuren van Visalys® Fill & Visalys® Flow met de optimale verwijzing naar de Vita-kleuren.¹⁾



PRODUCT KLEUREN	VITA-TANDEN (incl. vulling gemaakt van Visalys® kleuren) ¹⁾			
A1 LIGHT BRIGHT	A1	B1	C1	
A2 BRIGHT	A2	B2	D2	
A3 MEDIUM BRIGHT	A3	B3	D3	D4
A3.5 MEDIUM DARK	A3.5	C2	C3	B4
A4 DARK	A4	C4		

Bij bijzonder lichte tandkleuren gebruikt u de kleur BL²⁾

PRODUCT KLEUR	VITA-TANDEN (incl. vulling gemaakt van Visalys® kleur BL) ²⁾		
BL WHITE	OM1	OM2	OM3



Voor verkleurde caviteiten gewoon maskeren met OA2


PRODUCT KLEUR	VITA-TANDEN (incl. vulling gemaakt van Visalys® kleuren) ¹⁾	
OA2 OPAQUE	A1	A4
	Laag 1: gevuld met Visalys® Fill Kleur OA2 Laag 2: gevuld met Visalys® Fill Kleur A1	Laag 1: gevuld met Visalys® Fill Kleur OA2 Laag 2: gevuld met Visalys® Fill Kleur A4




¹⁾ Klas 1 vullingen in kunststof elementen, als voorbeeld met Visalys® Fill, om de consistentie van het Flex Shade System te demonstreren.
²⁾ Klas 4 vullingen in kunststof elementen, als voorbeeld met Visalys® Fill, om de consistentie van het Flex Shade System te demonstreren.

VISALYS® FILL & VISALYS® FLOW – DUURZAME STABILITEIT

VISALYS® FILL Buigsterkte voor en na thermische wisselbelasting²⁾

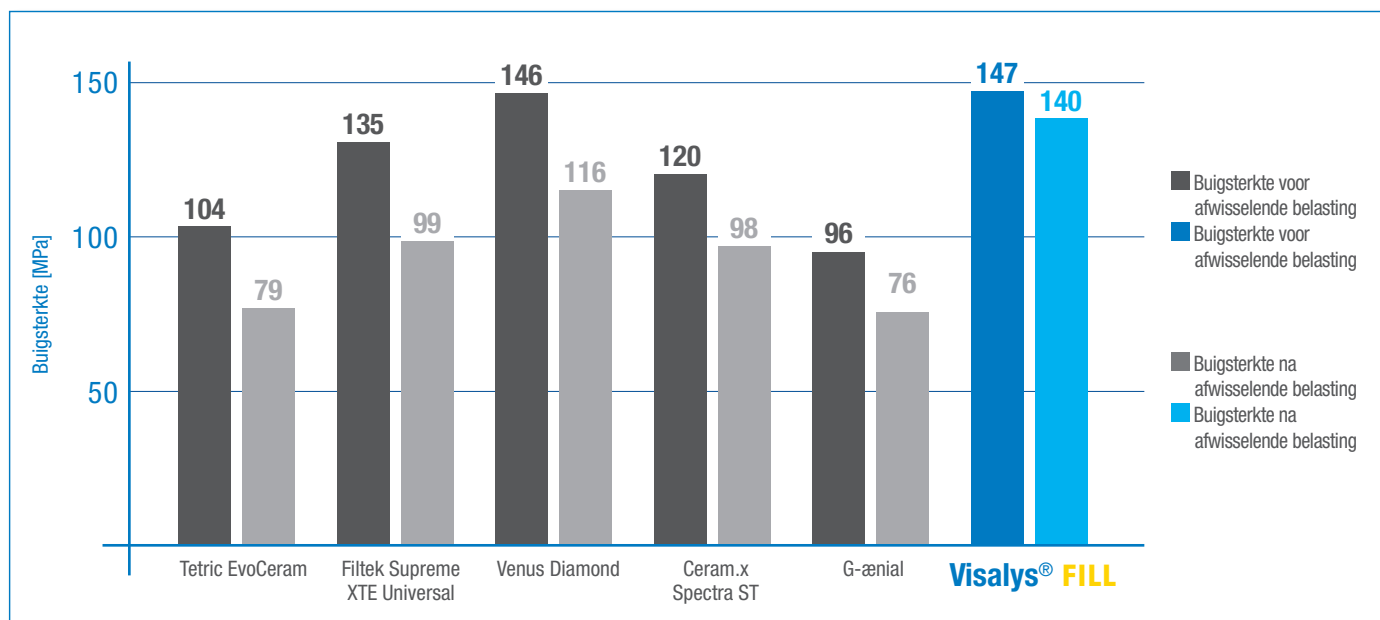

VISALYS® FLOW Buigsterkte voor en na thermische wisselbelasting²⁾

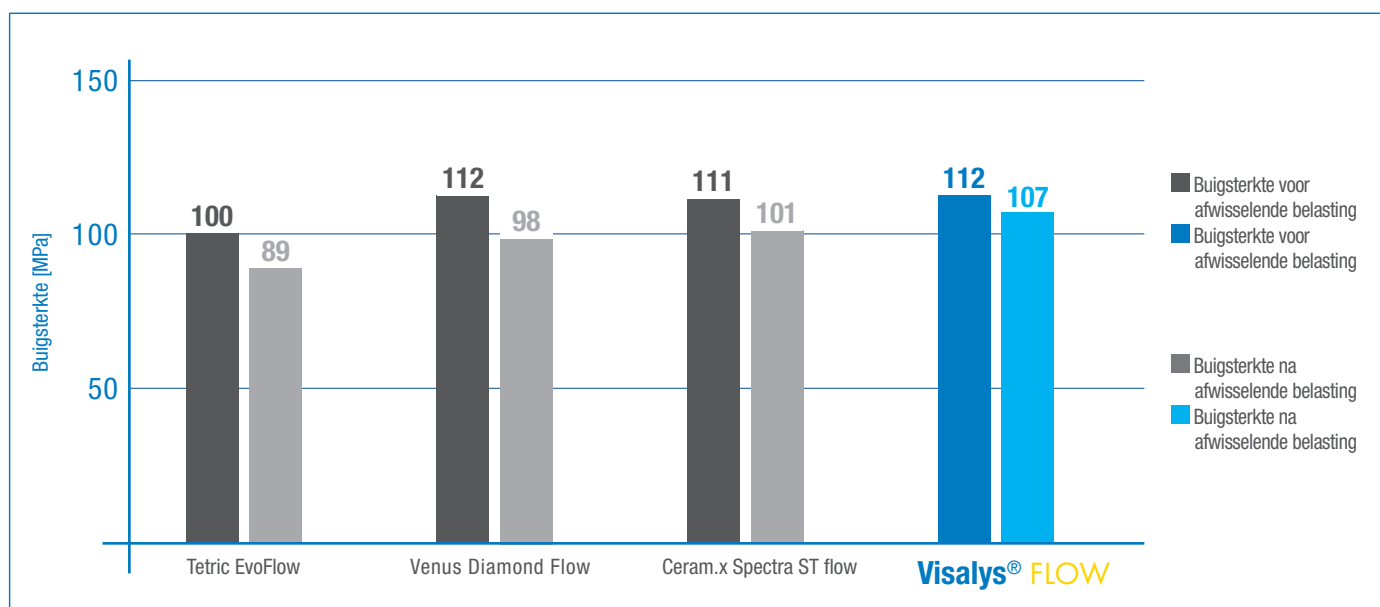


UITSTEKENDE BUIGSTERKTE OOK ONDER STRESS


- De getoonde thermische meting komt overeen tot maximaal 12 maanden belasting in de mond. (5000 cycli bij 5°C en 55°C)
- De waarden vertegenwoordigen de duurzame stabiliteit onder *in-vivo* omstandigheden

MEER GLAS DAN PLASTIC

VISALYS® FILL Anorganisch percentage in de composiet³⁾

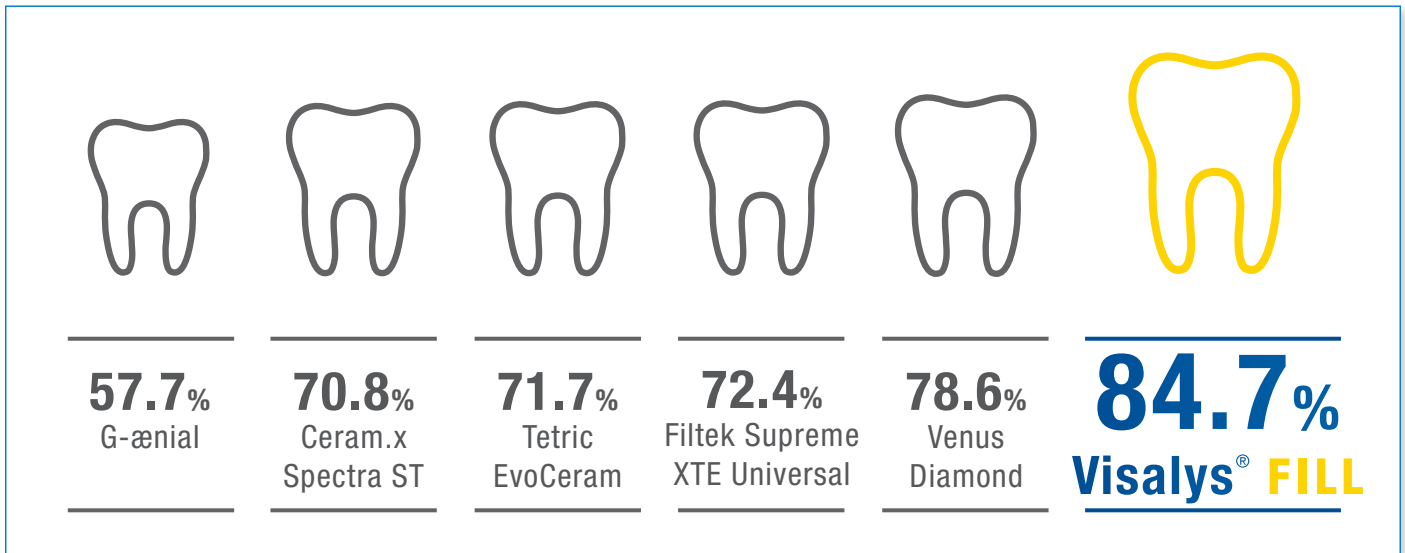

VISALYS® FLOW Anorganisch percentage in de composiet³⁾

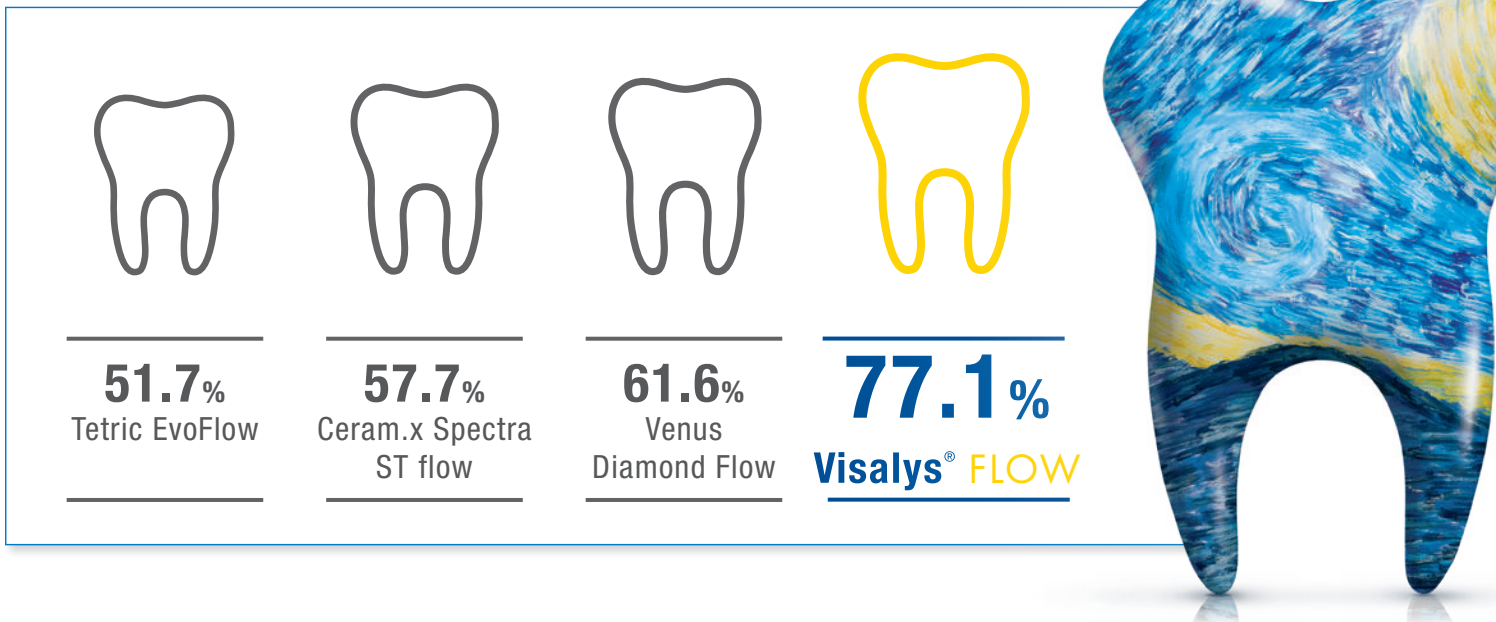


ZEER HOOG GEHALTE ANORGANISCHE VULSTOFFEN

- Voor een goede en duurzame stabiliteit
- Voor uitstekende compatibiliteit door hoge biocompatibiliteit


DUURZAME KLEURSTABILITEIT

VISALYS® FILL Waterabsorptie²⁾

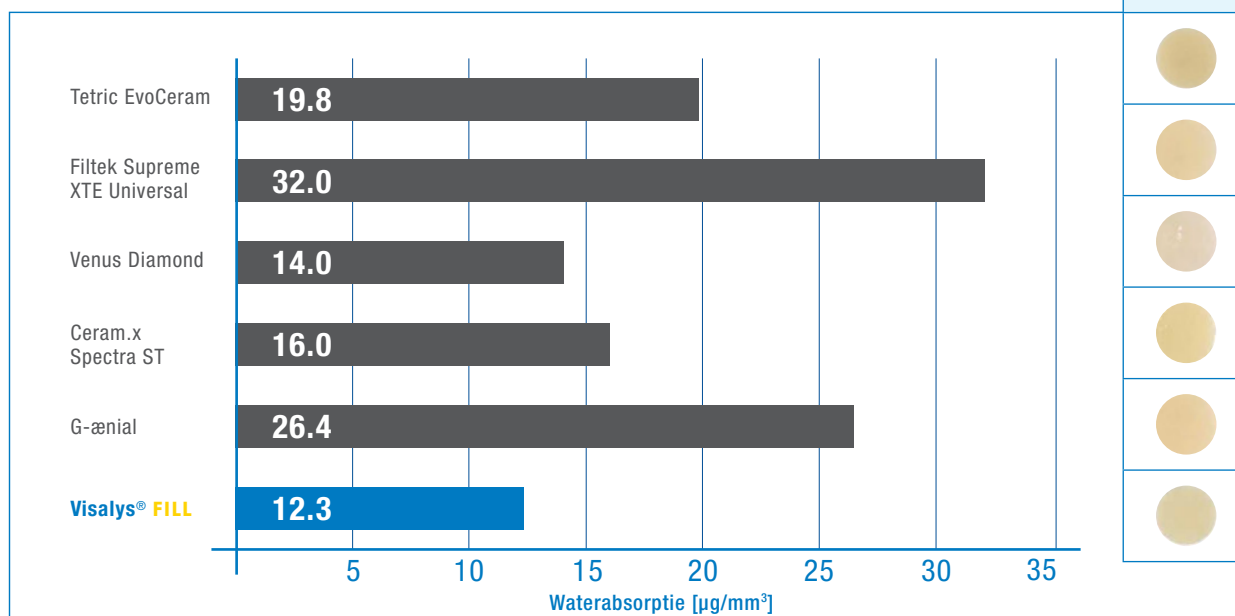

H ₂ O ⁴⁾	Coffee ⁴⁾	Wine ⁴⁾

VISALYS® FLOW Waterabsorptie²⁾

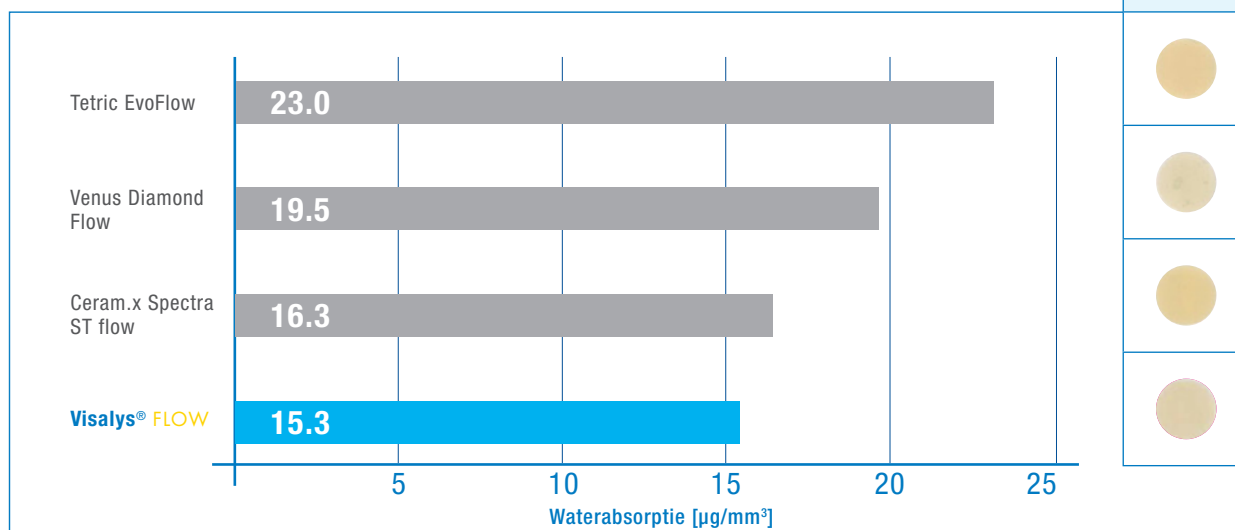

H ₂ O ⁴⁾	Coffee ⁴⁾	Wine ⁴⁾



LAGE WATERABSORPTIE


- Voorkomt verkleuring van vullingen
- Voor duurzame esthetiek




KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

LAGE KRIMP

VISALYS® FILL volumekrimp⁵⁾

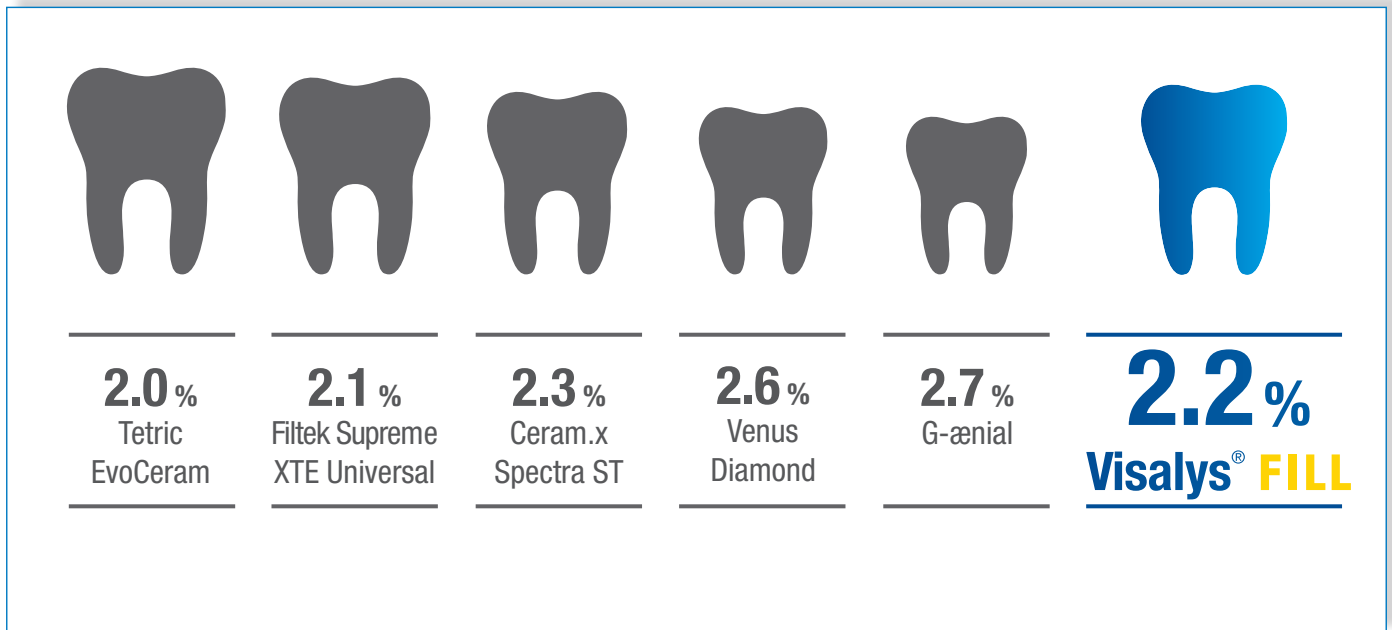

VISALYS® FLOW volumekrimp⁵⁾

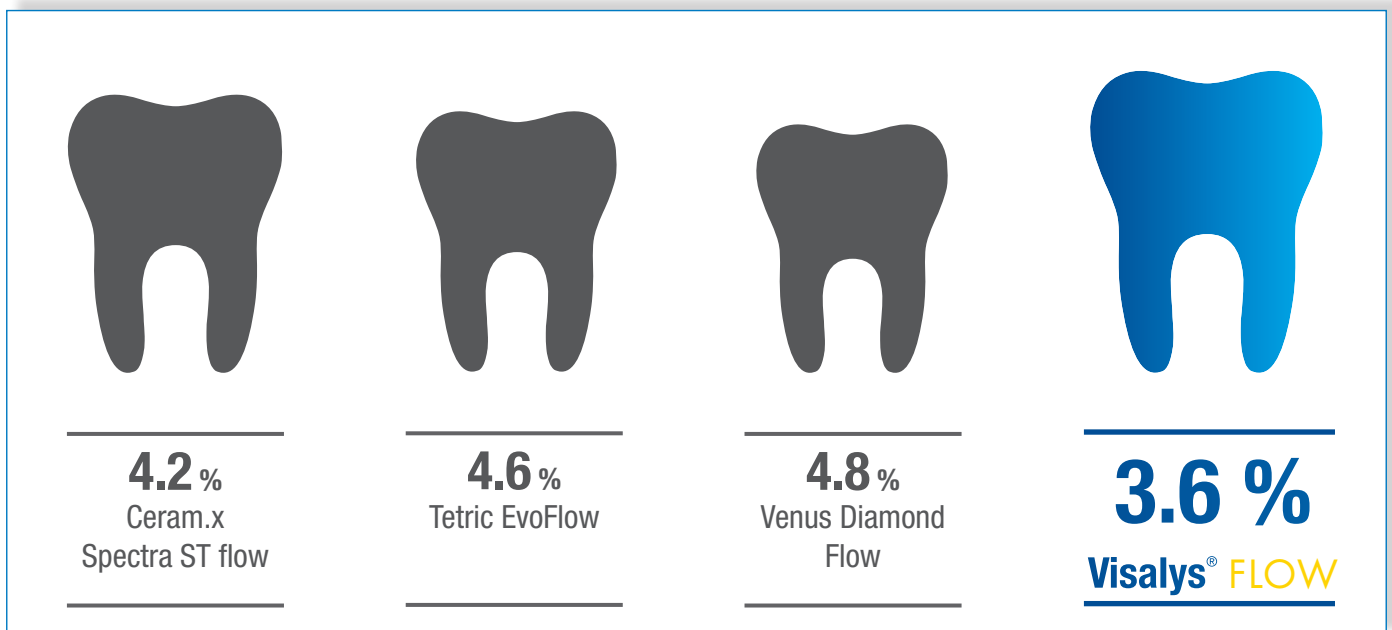

LAGE KRIMP

- Voor langdurige restauraties
- Voor mechanische retentie van het vulmateriaal in de tandholte
- Vermindert het risico van marginale “gaps” en secundaire cariës

HET SORTIMENT



Visalys® Fill & Visalys® Flow

Visalys® Fill

1 x 4 g syringe



A1	REF 1500299
A2	REF 1500399
A3	REF 1500499
A3.5	REF 1500599
A4	REF 1500699
Opaque A2	REF 1500799
Bleach	REF 1500899



Visalys® Fill

15 x 0.25 g caps



A1	REF 1501299
A2	REF 1501399
A3	REF 1501499
A3.5	REF 1501599
A4	REF 1501699
Opaque A2	REF 1501799
Bleach	REF 1501899



Visalys® Flow

1 x 1.8 g syringe
5 x application tips



A1	REF 1503099
A2	REF 1503199
A3	REF 1503299
A3.5	REF 1503399
A4	REF 1503499
Opaque A2	REF 1503599
Bleach	REF 1503699



Made in Germany

NOTITIES

Voor meer informatie vraag uw dental depot of direct via ons:
info@dental4.nl
www.dental4.nl
www.kettenbach-dental.com


KETTENBACHDENTAL
 Simply intelligent



0510727_3723